



脊椎の特殊手術器械

X線マーカー

ピンマーカー(2.5mmφロッド)とナットマーカー(6mm径で左右、形を変えてある)からなります。ピンマーカーにナットマーカーを通し、グリップハンドルで椎弓根に挿入します。

術中のX線撮影で正しい位置、方向を確認し、スクリュー挿入前にピンマーカーの長さからペディクルスクリューの長さを決定します。

グリップハンドル



ナットマーカー(凸型) S-10-01


ピンマーカー(鈍) S-10-07

ナットマーカー(丸型) S-10-02


ピンマーカー(片鋭) S-10-08

プッシャー S-10-06

ペディクルプローベ・オウル・デュラルフック

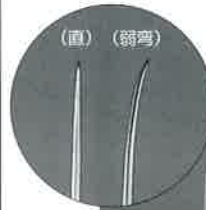

(直) (弱弯)

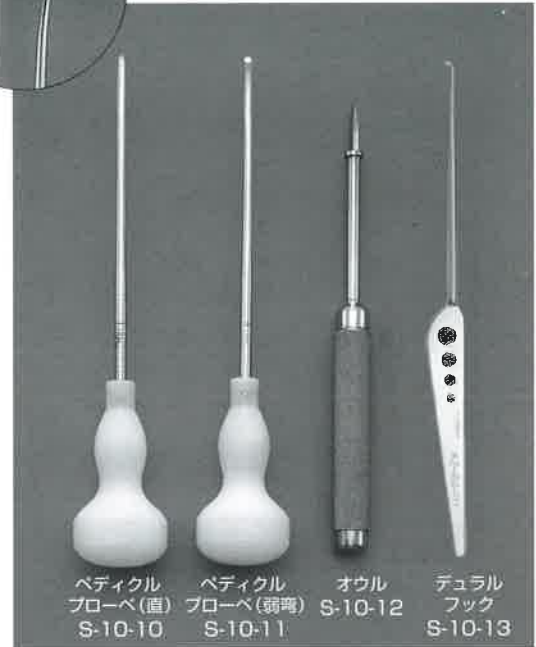

ペディクル
プローベ(直)
S-10-10

ペディクル
プローベ(弱弯)
S-10-11

オウル
S-10-12

デュラル
フック
S-10-13

X線マーカー・一体型



X線ショートマーカーを装着

脊椎操作時のX線マーカーの代用として使用します。



ナットマーカー(ハンドル) S-10-05

ナットマーカー・一体型(凸型)
S-10-03

ナットマーカー・一体型(丸型)
S-10-04

V型溝のみ



椎間関節のデコリテーションに使用します。

V型溝のみ S-11-05



発売元 **株式会社 イト一医科器械**

お問い合わせは・・・

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-48-15 TEL.03-6806-5030 FAX.03-6806-5031
E-mail:ito@ito-ika.co.jp